

Solutions prothétiques Medentika®

NOVALOC® MEDENTILOC™ FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE



MEDENTiKA®

SYSTÈME DE PARTIE FEMELLE NOVALOC®

Novaloc® redéfinit la rétention des prothèses dentaires grâce à son système de fixation conçu avec précision. Conçu pour le confort du patient, le système Novaloc® facilite l'insertion et le retrait des prothèses, tout en permettant un ajustement optimal de la rétention de la prothèse en fonction des différents besoins cliniques.



Compensation des divergences

En association avec les piliers angulés, vous pouvez compenser des divergences allant jusqu'à 70° entre les implants.

Hauteurs gingivales

Les piliers Novaloc® droits et angulés sont disponibles en 5 hauteurs gingivales différentes.

Angulation

Angulation des piliers de 15°.



Boîtier de partie femelle

Le boîtier de partie femelle est disponible en titane ou en également en PEEK.



Ouverture de la tête de la vis

La petite ouverture de la tête de la vis du pilier droit Novaloc® réduit l'accumulation de nourriture.



Surface ADLC

La qualité de surface du revêtement ADLC (carbone sous forme de diamant amorphe) offre une surface lisse et une dureté élevée pour une résistance à l'usure et un entretien réduit.



Insert de rétention

Fabriqués en PEEK, un plastique haute performance, avec une extrême précision, sa conception brevetée lui permet d'absorber une pression latérale de façon optimale. Disponible en 6 forces de rétention différentes.

PILIERS MEDENTILOC™



Le pilier MedentiLOC™ est très précis et entièrement compatible avec le système de parties femelles Novaloc®. Il offre une solution particulièrement rentable pour la rétention des prothèses. Sa conception simple, qui permet un traitement au fauteuil, représente un avantage considérable du pilier MedentiLOC™.




LES PILIERS MEDENTILOC™ SONT
DISPONIBLES EN VERSION DROITE
ET ANGULÉE, AINSI QU'EN CINQ
DIFFÉRENTES HAUTEURS GINGIVALES.

PARTIE MÂLE À VISSER MULTI-UNIT MEDENTILOC™ / NOVALOC®

Lorsqu'elles sont utilisées avec notre pilier Multi-unit, les parties mâles à visser Multi-unit, offrent une option supplémentaire pour la restauration. Elles vous permettent de passer facilement d'une restauration vissée à une prothèse complète amovible.

Les parties mâles à visser Multi-unit, ainsi que les options angulées MedentiLOC™ et Novaloc®, permettent une angulation de l'implant allant jusqu'à 30°.

Ces parties mâles à visser sont fixées à l'aide du tournevis approprié pour chaque système implantaire.

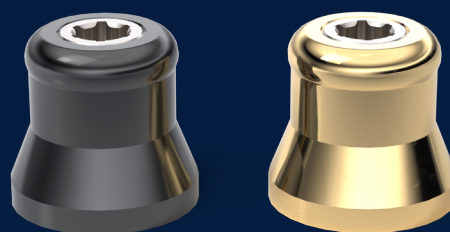

NOVALOC®/MEDENTILOC™ DIGITAL

PRÉCISION NUMÉRIQUE POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES


Novaloc® / MedentiLOC™ Digital représente notre innovation qui fait passer la prothèse amovible dans l'ère numérique de la dentisterie.

Ce flux de travail entièrement numérique comprend des scanbodies pour piliers Novaloc® et MedentiLOC™, des analogues repositionnables en titane stérilisables et des vis de fixation, tous conçus pour la précision et l'efficacité.

La bibliothèque disponible pour 3Shape et exocad simplifie le stockage et le partage des données, élimine la nécessité d'utiliser des matériaux d'empreinte classique et réduit le nombre de visites avec les patients. Novaloc® / MedentiLOC™ Digital est un outil polyvalent et indispensable pour les cabinets dentaires modernes. Il est compatible avec les principaux systèmes de scannage intra-oral et conçu pour faciliter les prises d'empreintes numériques.



FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER

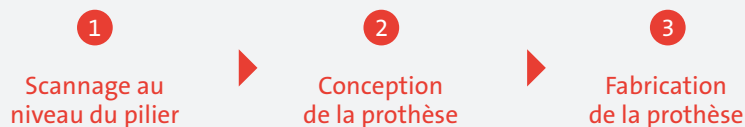

FLUX DE TRAVAIL AU NIVEAU DU PILIER AVEC MODÈLE IMPRIMÉ





NOVALOC® / MEDENTILOC™ DIGITAL

DESCRIPTION ET PRÉSENTATION DES PRODUITS



FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE NOVALOC® / MEDENTILOC™

Près de 100 % des flux de travail dans les solutions de
restauration implantaire amovibles sont numériques.



ACQUISITION DES DONNÉES



PLANIFICATION DU
TRAITEMENT



CHIRURGIE IMPLANTAIRE




POSE DES PILIERS
Novaloc® / MedentiLOC™



SCAN INTRAORAL
Scanbodies au niveau du pilier



CONCEPTION PROTHÉTIQUE
Conception post-chirurgicale précise

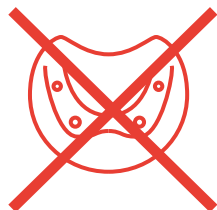

SANS MODÈLE

Technique directe

Sélection intraorale du pilier et
flux de travail

AVEC MODÈLE

Technique directe ou indirecte

Création du modèle de patient
avec des analogues de pilier



BIBLIOTHÈQUE DISPONIBLE
POUR 3SHAPE ET EXOCAD

AVANTAGES DU FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE



EFFICACITÉ

- Précision
- Rapidité
- Flux de travail numérique au cabinet
- Bibliothèque de piliers disponible pour 3Shape et exocad



FLEXIBILITÉ

- Fonctionne avec les principaux systèmes de scannage intra-oral
- Scannage aisé grâce à la conception et aux matériaux utilisés



EXPÉRIENCE DES PATIENTS

- Aucun matériau d'empreinte classique n'est nécessaire
- Moins de visites avec les patients



INFORMATIONS PRODUITS DES SCANBODIES ET DES ANALOGUES REPOSITIONNABLES

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION DU PRODUIT	MATÉRIAU
2010.726-NOV	Novaloc® Scanbody (pqt de 4)	PEEK
2010.727-NOV	Novaloc® Scanbody (pqt de 10)	PEEK
2010.728-NOV	Novaloc® Analogue CFAO (pqt de 4)	Titane
2010.729-NOV	Novaloc® Analogue CFAO (pqt de 10)	Titane

SCANNER OU CLIQUER
POUR ACCÉDER À
NOTRE BOUTIQUE
EN LIGNE :



SCANNER OU
CLIQUER POUR
ACCÉDER À NOS
BIBLIOTHÈQUES :



APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE




1




- S'assurer que la surface où le pilier est posé est propre, exempte de résidus et sèche.
- Placer le scanbody sur chaque pilier Novaloc® / MedentiLOC™ et appuyer fermement.
(S'il y a un espace entre le scanbody et la gencive, le collier de montage Novaloc® /MedentiLOC™ peut être placé sur les piliers pour fermer l'espace et améliorer le scannage)

2

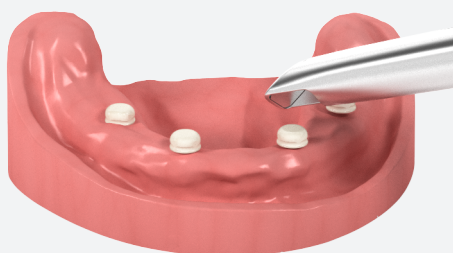

- Poursuivre le scannage en suivant le mode d'emploi du logiciel et du matériel.
- Sélectionner « scannage simple » ou flux de travail prothétique dans le logiciel de numérisation.

3

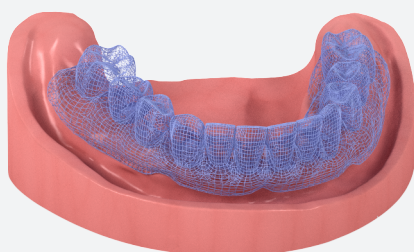


- Traiter le scan et l'envoyer au laboratoire dentaire pour la conception et la fabrication de la prothèse définitive.
- Le scanbody crée un renforcement dans la base de la prothèse afin de permettre la pose du boîtier sans interférence avec l'acrylique de la prothèse environnante.

SCANNER OU CLIQUER
POUR REGARDER LA
VIDÉO ÉTAPE PAR ÉTAPE
DANS **3SHAPE**



SCANNER OU CLIQUER
POUR VOIR LA VIDÉO
ÉTAPE PAR ÉTAPE
DANS **EXOCAD**



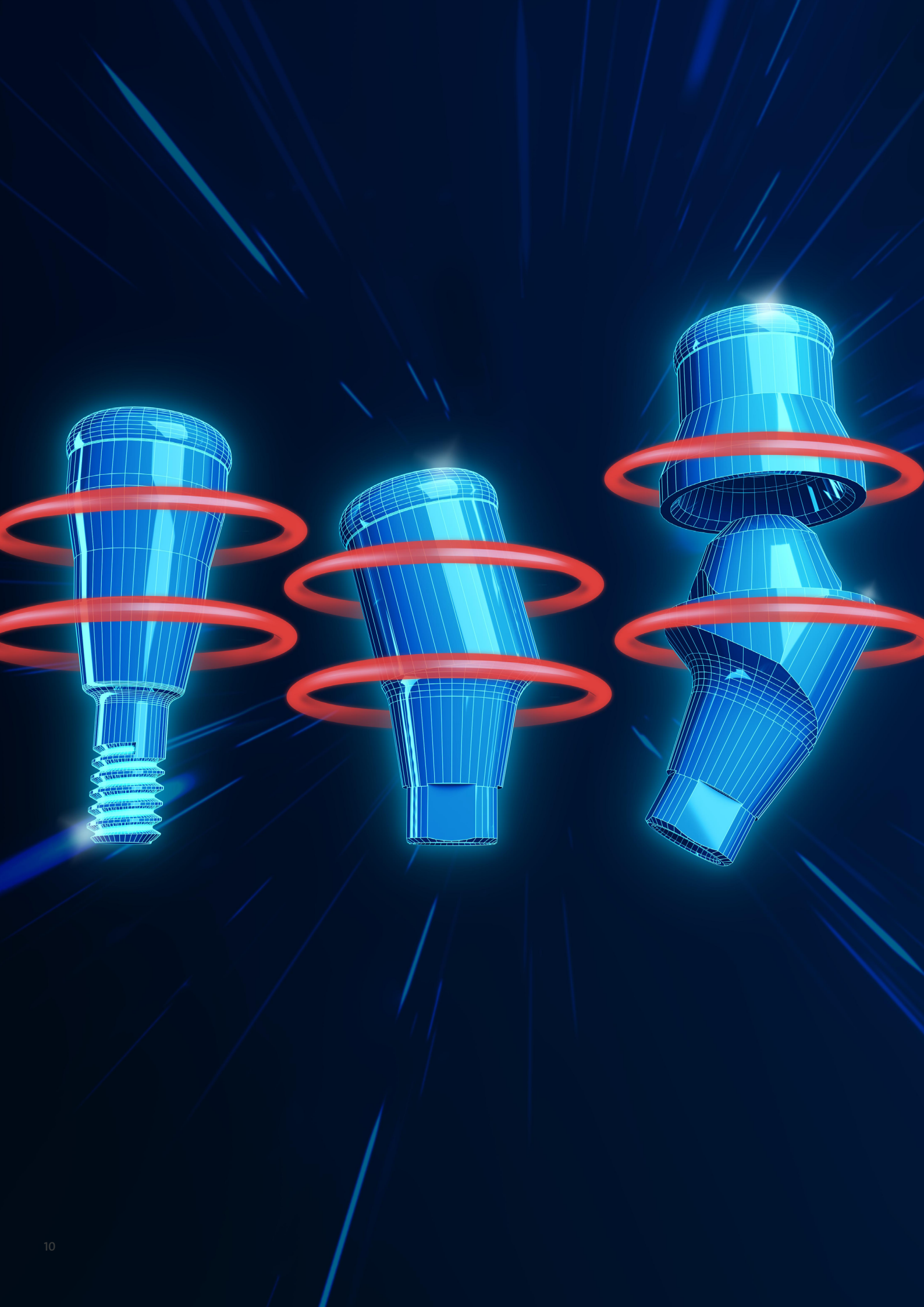

AU-DELÀ DES SOLUTIONS ORIGINALES



CLIQUEZ OU SCANNEZ LE
CODE POUR PLUS DE DÉTAILS
SUR NOS PRODUITS DANS
NOTRE ESHOP





DES PROTHÈSES
COMPATIBLES REPENSÉES.



MEDENTiKA®

A Straumann Group Brand

© MEDENTiKA® GmbH, 2024. Tous droits réservés.

MEDENTiKA® et/ou les autres marques commerciales et logos de MEDENTiKA® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de MEDENTiKA® GmbH et/ou de ses sociétés affiliées.

Notez que cette brochure contient des images créées par IA.

PM02_01_0064_FR_09/24

MEDENTiKA® GmbH

Hammweg 8–10

76549 Hügelsheim

Allemagne

info@medentika.de

www.medentika.com

